

取扱説明書

Wellstyle タングル&リラックス

このたびは、本製品をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この「取扱説明書」には、本製品を安全にお使いいただくための注意事項や
使用方法などを記載しています。

- 本製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでも見られる場所に保管してください。
- 本製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合もあります。
- ご不明な点がございましたら、当社までお問い合わせください。

株式会社フロンティア

1.ご使用上の注意

⚠ 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 取り扱いが理解できないと思われる方が使用する際には、十分注意してください。
取扱説明書が理解できないと思われる方（幼児や認知症の方など）が使用する場合には、保護者、介護者などが必ず取扱説明書に従った使用を確保し、本人による製品の誤動作、その他誤った使用方法による事故を未然に防いでください。
- 首にかけたりしないでください。
事故の原因となります。
- 商品の一部を口にしたり、飲み込んだりしないように注意してください。
- 使用中に手に痛みや発疹などが現れた場合は、すぐに使用を中止してください。
痛みや発疹が治まらないときは、医師に相談してください。

⚠ 注意

【軽傷または中程度の傷害を招く可能性があるもの】

- 本製品を強い力で強引に動かさないでください。
破損の原因になります。
- 火気に近づけないでください。
変質・変形の原因になります。また、やけどや火災の原因になります。

2.製品の特長

- ゴム表面の凹凸によって触覚に刺激を与えることや、リラックス効果もあります。
- 少ない力でも動くため、手の動きや関節のリハビリに役立ちます。



3.ご使用方法


- ① 両手で持ちながら、さまざまな方向へやさしく動かしてください。表面の凹凸を強めに握りながら動かすと握力の維持や向上にもつながります。
- ② 片手で動かす際は、本製品を指と手の平に絡ませるように動かしてください。

△注意

強引にひねったり、曲げたりしないでください。破損の原因となります。

※ 部品が破損した場合

隣接部品を左右に引っ張り、破損した部品だけを取り除いてください。隣接した部品同士をつなぎ合わせることで、再び使用することができます。

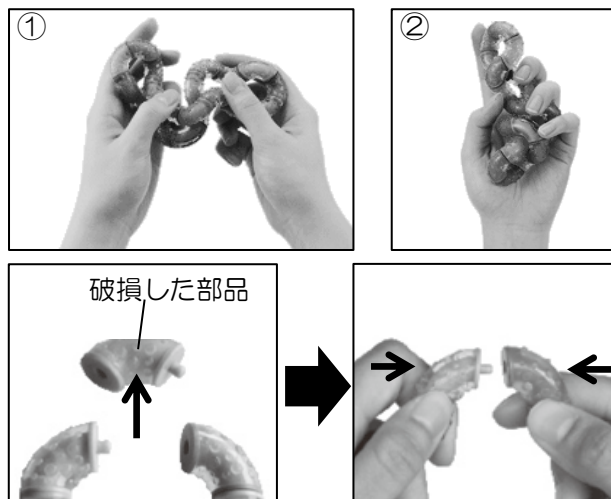

4.日常のお手入れ

- 汚れた際は、湿った布でふいてください。
- 湿気の多い場所や直射日光の当たらない場所で保管してください。

△注意

シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用できません。変質や破損のおそれがあります。

5.仕様

製品名	Wellstyle タングル&リラックス
全長	40cm
重量	約61g
材質	樹脂、合成ゴム

■製品の仕様は予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社フロンティア

フリーコール **0120-294-518**

千葉本社 福祉本部 〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港42-4
TEL：043-301-8338

●アフターサービスのお問い合わせ

取扱店